

SMC-321

SIMULADOR PUNCIÓN LUMBAR

Descripción

El simulador de punción lumbar es un dispositivo diseñado para entrenar a profesionales de la salud, en la técnica de realizar una punción lumbar de manera segura y efectiva. Esta técnica se utiliza para obtener una muestra del líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro y la médula espinal.

Características

Superficie de la piel del simulador que imita la textura y elasticidad de la piel humana

Permiten la inserción de agujas de punción lumbar de manera realista

Proporciona retroalimentación háptica para simular la resistencia y la sensación durante la inserción.

Sistema que simula la salida de líquido cefalorraquídeo cuando se realiza la punción lumbar correctamente.




InnHealth

SMC-321

SIMULADOR PUNCIÓN LUMBAR

Recomendaciones

- Almacenar el simulador erguido en su base, dentro de su maleta.
- No realizar manipulación de la piel, solo debe ser remplazado por personal autorizado.
- Limpiar con espuma limpiadora en seco, o agua con jabón neutro o alcohol al 70%.
- Realizar la recarga del sistema de drenaje solo con alcohol al 70% para evitar formación de hongos.
- Seguir las recomendaciones de la capacitación realizada
- Puncionar con agujas 20 y 22 fr, se recomienda no reutilizar agujas para aumentar la vida útil del simulador

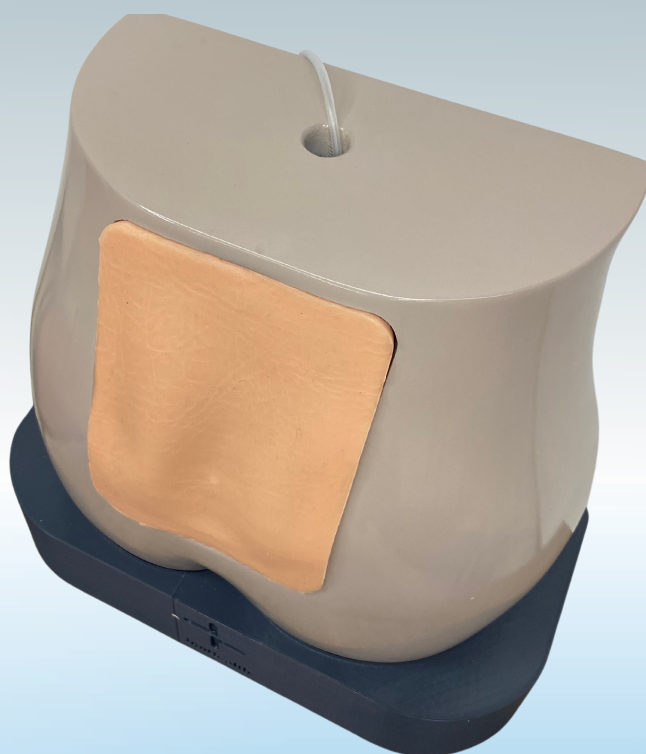

Dimensiones

Alto 35 cm
Ancho 36 cm
Profundidad 18 cm



InnHealth

SMC-741

SIMULADOR PUNCIÓN LUMBAR

Inserto ecogénico

- El simulador cuenta con insertos intercambiables para diferentes usos. El inserto estándar, permite la punción por referentes anatómicos y palpación.
- Inserto para punciones guiadas por ecografía: permitirá la visión ecográfica de los reparos anatómicos y la punción guiada del espacio epidural.



Incluye

Maletín de transporte

Consumibles

2 Pielas

Inserto lumbar Estándar

Inserto lumbar Ecogénico



InnHealth